




AP PLASTICS INC
MADE IN CANADA

EL1 Face Shield

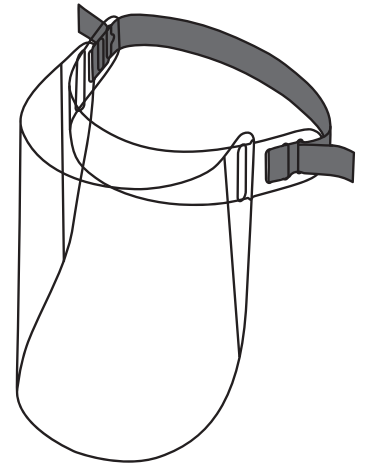

Cleaning products required:

Soap (e.g. dish soap) and disinfectant wipes (e.g. Accel wipes, Hydrogen Peroxide on clean cloth).


PPE required:

Exam Gloves (Vinyl or Nitrile)



If face shield appears damaged or compromised: DO NOT USE.


1 IMPORTANT - Clean both sides while Separated and Flat Before Assembly and First Use!

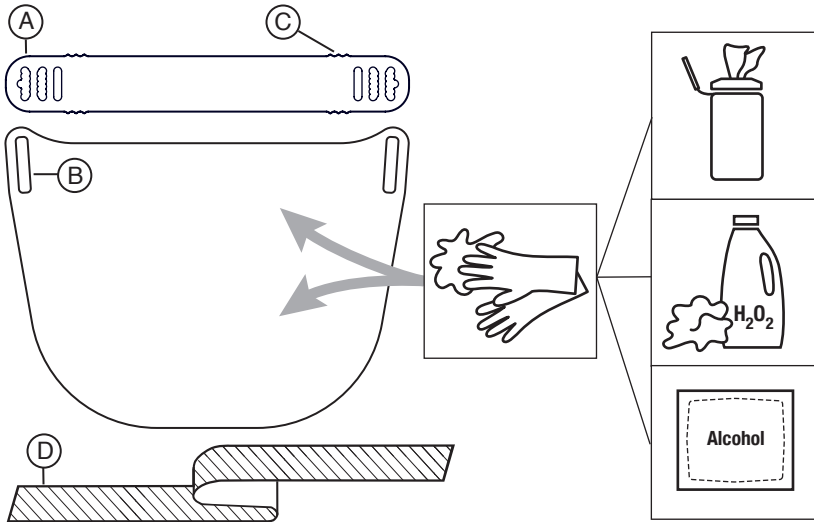

Cleaning & Disinfecting

1. Don new pair of exam gloves.
2. Using one disinfectant wipe at a time, and first squeezing excess disinfectant into a sink to prevent splash to face, thoroughly wipe the interior followed by the exterior of the facial protection.
3. Ensure all surfaces remain wet with disinfectant for at least 1 minute (or applicable disinfectant wipe contact time).
4. Equipment may be rinsed with tap water if visibility is compromised by residual disinfectant.
5. Allow to dry (air dry or use clean absorbent towel).
6. Remove gloves and perform hand hygiene.

2

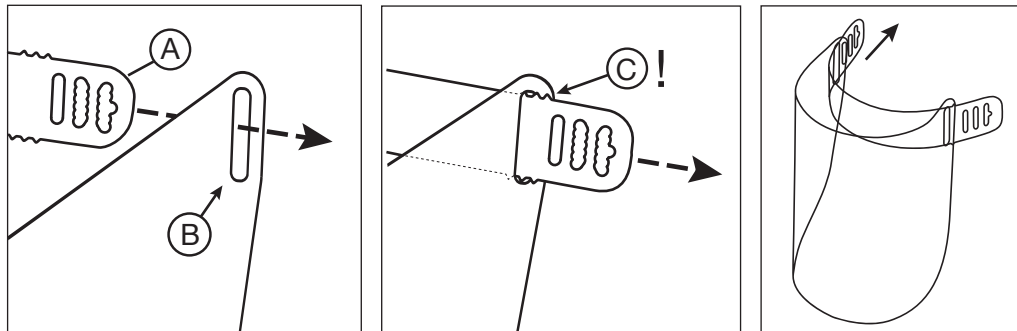


Insert Forehead Clip (A) into Visor slot (B). Pull until 'nubs' (C) click through. Repeat for opposite side.

Videos: Assembly + Cleaning



aplasticsinc.com/EL1

3

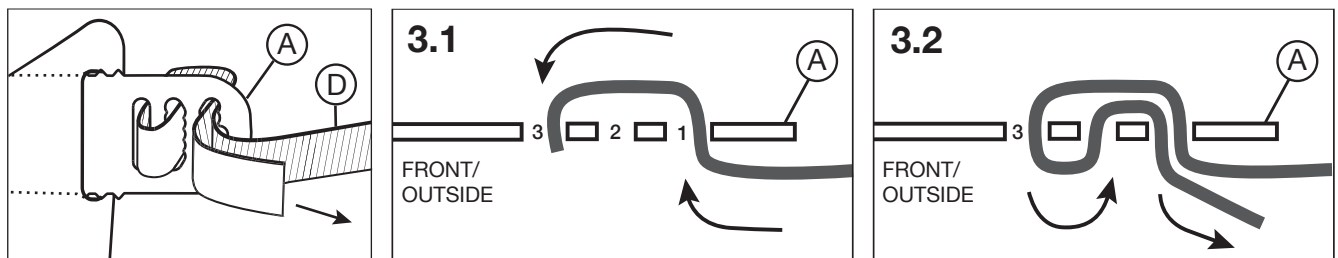

3.1 Thread Headband (D) into Forehead Clip (A). In through Slot 1, back out through Slot 3.

3.2 Continue in through Slot 2, then back out Slot 1. Repeat for opposite side. Tighten to fit.



AP PLASTICS INC
FABRIQUÉ AU CANADA


Visière de protection faciale EL1

Produits de nettoyage recommandés :
savon (ex. savon de vaisselle) et lingettes désinfectantes (ex. lingettes Accel ou linge propre imbibé de peroxyde d'hydrogène)


EPP recommandé :
Gants d'examen (vinyle ou nitrile)



NE PAS UTILISER la visière faciale si elle est endommagée

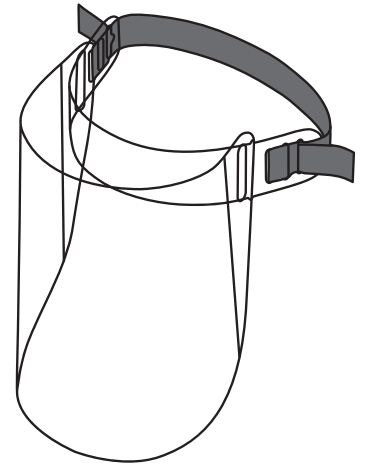


1 IMPORTANT - Avant d'assembler la visière faciale et de l'utiliser pour la première fois, nettoyez l'intérieure et l'extérieure!

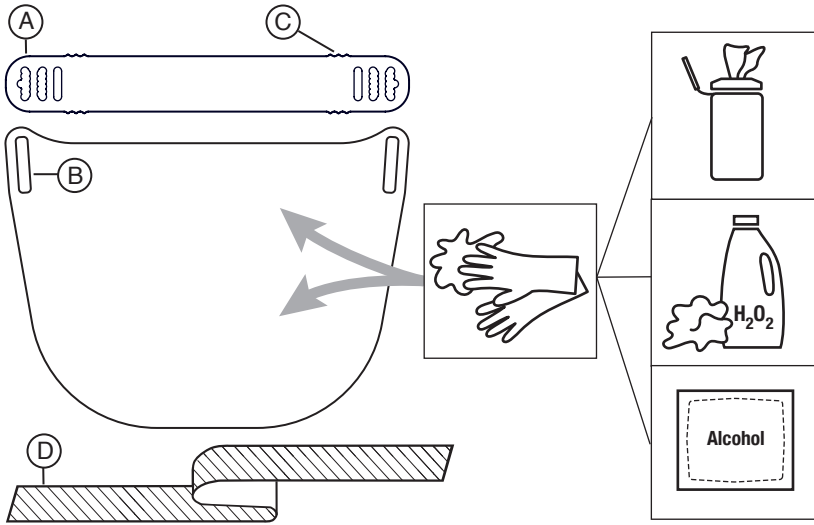

NETTOYAGE & DÉSINFECTION

1. Glissez une paire de gants neufs;
2. Utilisez une lingette désinfectante, bien nettoyer l'intérieure et l'extérieure de la visière de protection faciale, en veillant tout d'abord à éliminer l'excédent de liquide désinfectant dans un évier pour éviter toute éclaboussure sur le visage;
3. Veillez à ce que toutes les surfaces de la visière soient bien couvertes de désinfectant pendant au moins une minute;
4. L'équipement peut être rincé avec de l'eau du robinet si la visibilité est compromise par le produit désinfectant;
5. Laissez sécher (à l'air ou à l'aide d'une serviette bien absorbante);
6. Retirez les gants, puis procédez à l'hygiène des mains.

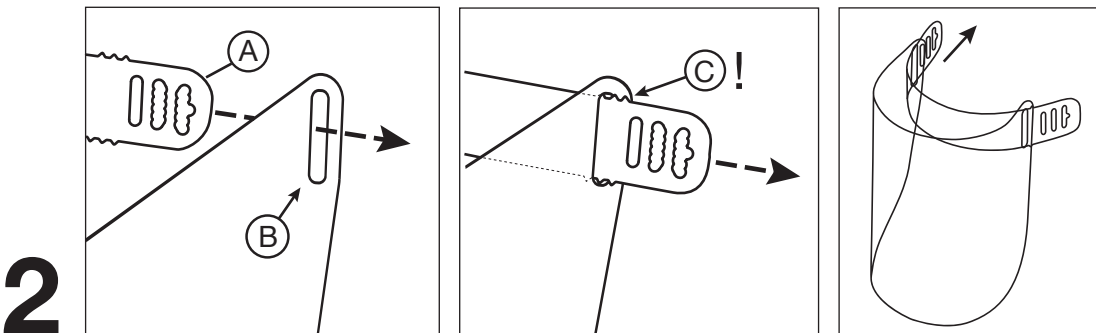


Videos : Assemblage + nettoyage



aplasticsinc.com/EL1

2 Faites passer la sangle (A) dans la fente de la visière (B) puis tirez sur la sangle (C) jusqu'à ce qu'elle clique. Répétez l'opération de l'autre côté.

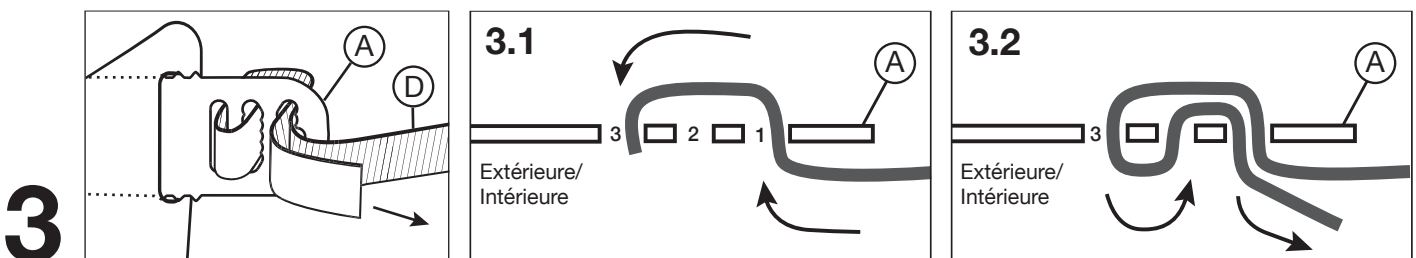

3.1 Bande frontale (D) dans la fente (A). Insérez dans la fente 1 en la ressortant par la fente 3.

3.2 Continuez dans la fente 2, puis ressortez-la par la fente 1. Répétez l'opération de l'autre côté.

Tirez sur la sangle pour la régler.